

wau



PLASMA DEVICE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение.....	5
Детали устройства.....	5
Порядок работы.....	6
Способ применения.....	7
Чистка.....	8
Хранение.....	8
Зарядка.....	9
Меры предосторожности.....	9
Гарантия.....	10


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	BPW-002
Материалы	ABS пластик, PC пластик, силикон
Размер (ВхШхГ)	Массажер с базой 189x50x45 мм
Вес	Массажер с базой 183 гр
Источник питания	литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора	1000 мАч
Рабочее напряжение	3,7 В
Мощность	5 Вт
Время зарядки	3 часа
Время работы (от полной зарядки)	60 минут
Смарт-таймер	10 минут
Уровень водонепроницаемости	IPX3

Назначение

Аппарат для омоложения NEO включил в себя современную плазменную технологию. Она используется для дезинфекции кожи и борьбы с кожными заболеваниями: ионизированный газ убивает болезнетворные бактерии на поверхности кожи. Омоложение плазмой происходит за счет регенерации кожи: нагрев, который оказывает плазма, стимулирует восстановление коллагена. Под действием плазмы также перестраиваются липидные биослои, формируются временные каналы, что облегчает прохождение лекарственных и косметических средств в кожу.

Детали устройства

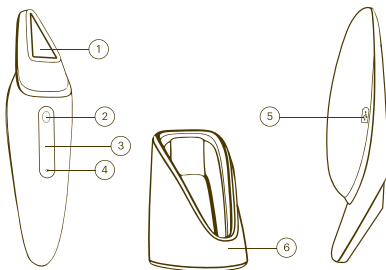

1. Рабочая поверхность
2. Кнопка вкл/ выкл/ переключение уровня интенсивности
3. Индикатор уровня интенсивности
4. Индикатор зарядки
5. Разъем для зарядки
6. База-подставка

Комплектация

Устройство x1, база-подставка x1, кабель для зарядки x1, мешочек для хранения x1, салфетка x1, инструкция x1.

Порядок работы

1. Длительным нажатием (2 сек) на кнопку вкл/ выкл включите устройство. Звуковой сигнал обозначит включение девайса.
2. Загорится дисплей с индикаторами уровня интенсивности. В устройстве предусмотрено 3 уровня силы воздействия: **STRONG** (сильный), **MEDIUM** (средний) и **SOFT** (слабый).
3. Повторным нажатием на кнопку переключения уровней выберите подходящую вам силу воздействия. Первым запускается уровень **SOFT**, его иконка загорится на дисплее. Повторное нажатие на кнопку переключит вас на уровень **MEDIUM**, следующее нажатие запустит уровень **STRONG**.
4. В аппарате предусмотрен смарт-таймер, девайс автоматически выключится через 10 минут работы, издав звуковой сигнал.

5. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку вкл/ выкл/ переключение уровня интенсивности.

Способ применения

1. Умойтесь, используя ваше очищающее средство. Очистите кожу от загрязнений и излишков кожного сала.

2. Осушите лицо от жидкости перед тем как использовать массажер. Если на вашей коже останется вода — это может стать причиной получения травмы. Пожалуйста, будьте предельно внимательны.

3. Включите устройство и выберите необходимый уровень интенсивности. Рекомендуется начинать с минимальной силы воздействия, чтобы кожа могла адаптироваться к применению аппарата.

4. При проведении процедуры не прижимайте девайс вплотную к коже, держите его на расстоянии 2-3 мм от поверхности лица. Медленно проводите массажером по коже, двигаясь по массажным линиям снизу (от подбородка) вверх (до линии роста волос). Особое внимание уделите проблемным зонам. Во время использования девайс издает звук генерации плазмы, вы также можете почувствовать запах озона — это нормально.

5. После завершения процедуры выключите девайс, очистите кожу лица и нанесите ваше уходовое косметическое средство. Для лучшего впитывания косметики проведите легкий массаж.

6. Очистите рабочую поверхность аппарата влажной (пропитанной спиртом) салфеткой.

[Важно]: Пыль и остатки кожного сала легко прилипают к керамической части рабочей поверхности аппарата, когда они расщепляются плазмой в процессе процедуры. Это может привести к пожелтению керамической поверхности, однако не влияет на эффективность работы устройства.

Чистка

- Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен.
- Строго запрещено мочить девайс, погружать его в воду или мыть под струей проточной воды.
- Пожалуйста, чистите аппарат при помощи мягкой салфетки или ватного диска.
- Допустимо очищать рабочую поверхность и корпус устройства влажной тканью.
- Не используйте щелочные чистящие средства, эфирные масла на спиртовой основе или растворители для очищения прибора.

Хранение

- Храните устройство в сухом и непыльном месте.
- Держите устройство вдали от воздействия высоких температур.
- Держите устройство вдали от агрессивных жидкостей.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Зарядка

- При низком уровне заряда аккумулятора индикатор зарядки начинает быстро мигать, а сам аппарат издает короткие звуковые сигналы, после чего выключается.
- Подключите зарядный кабель с разъемом Type-C к разьему устройства, обратный конец кабеля с разъемом USB подключите к адаптеру.
- Во время зарядки индикатор заряда мигает.
- Во время зарядки аппарат не включается.
- При достижении полной зарядки индикатор заряда будет гореть постоянно.

Меры предосторожности

Запрещено использовать девайс:

- детям;
- лицам, страдающим от аллергии;
- лицам, перенесшим хирургические операции на лице/глазах.

- Не используйте девайс, если он был погружен в воду, работает некорректно, если он был поврежден или сломан.
- Не используйте девайс в области глаз (вдоль верхней и нижней орбитальной косточки), в области висков, на щитовидной железе, а также на области груди и гениталий.
- Не разбирайте устройство, так как это может привести к повреждениям, неисправностям, поражению электрическим током, пожару или травмам.

Гарантия

На Аппарат для омоложения NEO от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту.

Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

NEO

АППАРАТ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ

Артикул: **BPW-002**

Материал: **ABS пластик, PC пластик, силикон**

Размер: **(ВхШхГ) 189x45x50 мм**

Вес: **183 гр**

Напряжение: **3,7 В**

Мощность: **5 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, офис 14-14. 8-800-600-33-61.

zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru