

wau



ATAMA

HAIR GROWTH & SCALP
MASSAGE DEVICE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	4
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения	7
Меры предосторожности	7
Чистка	8
Хранение	8
Зарядка	8
Утилизация.....	10
Гарантия.....	10

Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	BP216
Материалы	ABS + силикон + сталь SUS303
Размер (ВхШхГ)	234x87,4x47,7 мм
Вес	213,5г
Встроенный источник питания	AC100-240V 50/60HZ
Напряжение питания	5V1A
Рабочее напряжение	3,7 Вт
Емкость аккумулятора	850 мАч
Время зарядки	3 часа
Время работы от полной зарядки	2 часа
Максимальное время непрерывного использования устройства	10 минут
Степень защиты от воды	IPX6

Назначение

Массажер АТАМА — идеальный выбор для ускорения роста волос, поддержания их здоровья, а также улучшения состояния кожи головы в домашних условиях.

Каждому пользователю доступны несколько режимов для индивидуальной настройки устройства под личные нужды:

EMS — стимулирует кожу головы с помощью ионов и тока с определенными характеристиками, способствует очищению закупоренных пор и активирует «спящие» волосяные фолликулы. В результате кожа головы легче усваивает питательные вещества, а корни волос укрепляются.

LED — красный/ синий свет стимулирует рост волосяных фолликулов, улучшает их иммунитет, ускоряет рост волос, делает их гуще, борется с выпадением волос, а также повышает их эластичность и придает блеск. VR — режим вибрации, стимулирующий активизацию спящих волосяных фолликулов и рост здоровых волос.


Детали устройства



Комплектация

Устройство x1
Мешочек для хранения x1
Кабель для зарядки x1
Инструкция x1

Порядок работы

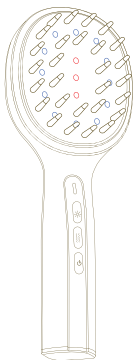

1. Рабочая поверхность массажера в целях защиты от повреждений покрыта 2-мя защитными пленками. Перед использованием массажера снимите обе пленки.



2. Длительное нажатие (1,2 сек) включает устройство (при включении массажер издает 1 звуковой сигнал) и режим EMS (уровень 1), при этом на индикаторе загорится 1 лампочка.

После включения первое краткое нажатие кнопки активирует 2-й уровень режима EMS, при этом на индикаторе загорится 2 лампочки. Второе краткое нажатие — 3-й уровень режима EMS, при этом на индикаторе загорится 3 лампочки. При длительном нажатии (1,2 сек) работающее устройство издает 2 звуковых сигнала и выключится.



3. Первое краткое нажатие включает режим непрерывной вибрации. Второе нажатие — режим пульсирующей вибрации. Третье — выключает режим вибрации. Переключение режимов сопровождается коротким звуковым сигналом.



4. Первое краткое нажатие включает режим светотерапии красный свет (630 нм) + лазер (650 нм). После второго нажатия цвет сменится на синий. Третье нажатие выключает LED-режим. Переключение режимов сопровождается коротким звуковым сигналом.

По истечении 10 минут непрерывного использования устройство отключится автоматически без перехода в режим ожидания, то есть у Вас не будет «запаса» времени для переключения функций.

При низком уровне заряда массажер издает 5 звуковых сигналов, а перед выключением устройства индикатор батареи подаст мигающий световой сигнал 10 раз.

Режимы EMS/ LED/ вибрация могут быть использованы в любой комбинации.

Способ применения



1. Массаж макушки головы осуществляется круговыми движениями по часовой стрелке



2. Массаж других частей головы осуществляется движениями сверху-вниз

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства;
2. Беременным женщинам при использовании устройства необходимо руководствоваться рекомендациями врача;
3. Использовать с осторожностью:
 - В течение менструации и в период лактации;
 - При наличии телеангиэктазии;
 - При наличии временной пломбы или в ходе лечения зубов;
 - При аллергии на металл;
 - При повышенной температуре и гипертонии;
 - При наличии пластических операций, воспалений кожи и зуда;
4. Не использовать вблизи мест с металлическими протезами (глазные яблоки, внутреннее ухо, области костей и суставов);
5. Запрещается использовать в местах с патологиями вен или артерий, а также при наличии тромбоза или проблем со свертыванием крови;
6. Не допускайте сильного физического воздействия на кожу головы;
7. Используйте устройство только в соответствии с руководством пользователя;
8. Запрещается самостоятельно разбирать, обслуживать и модернизировать изделие;

9. Пожалуйста, храните прибор в сухом и чистом месте;
10. Не храните устройство в местах с повышенной/ пониженной температурой окружающей среды, а также вблизи источников открытого огня;
11. Вынимайте вилку из розетки после завершения зарядки.


Чистка

- a. Перед очисткой прибора убедитесь, что он выключен, не подключайте его к источнику питания.
- b. После каждого использования протирайте устройство влажной тканью и храните в сухом и прохладном месте.
- c. Устройство предназначено только для личного использования, не используйте его совместно с другими людьми.
- d. Сохраните это руководство пользователя для дальнейшего использования.

Хранение

- a. Храните устройство в сухом и непыльном месте.
- b. Держите устройство вдали от воздействия высоких температур.
- c. Держите устройство подальше от агрессивных жидкостей.
- d. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Зарядка

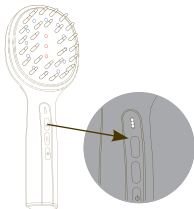

- 1) Зарядка через подключение к компьютеру: включите компьютер, подключите зарядный кабель к USB-порту компьютера и Type-C разъему устройства.
- 2) Зарядка с помощью адаптера: подключите кабель USB для зарядки к порту USB адаптера и Type-C разъему устройства.
- 3) Индикация: во время зарядки 3 лампы индикатора загораются поочередно, при достижении 100% заряда все 3 лампы будут гореть постоянно.

Спецификация электропитания: 5V 1A 110-220V (несоблюдение этого условия приведет к повреждению устройства и его поломке).

Утилизация



Для утилизации изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Вместо этого передайте его в специализированный центр переработки для защиты окружающей среды.

Гарантия

На массажер для стимуляции роста волос и ухода за кожей головы ATAMA от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

АТАМА

МАССАЖЕР ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС И УХОДА ЗА КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

Артикул: **BP216**

Материал: **ABS + силикон + сталь SUS303**

Размер: (ВхШхГ) **234x87,4x47,7 мм**

Вес: **213,5 гр**

Напряжение: **5 В**

Мощность: **3,7 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А. Н. 125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-14.

8-800-600-33-61.

zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS

