

wau



MORI BLACK

SONIC TOOTHBRUSH

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	4
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения	6
Чистка	8
Хранение	8
Зарядка	9
Утилизация.....	10
Гарантия.....	11
Вопросы и ответы.....	11

Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	LL-35
Мощность	3 Вт
Рабочее напряжение	5 В
Источник питания	литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора	750 мАч
Степень защиты от воды	IPX7
Режимы и частота колебаний	Деликатный - 31 000 колеб/мин Уход за деснами - 35 000 колеб/мин Полировка - 41 000 колеб/мин Отбеливание - 45 000 колеб/мин Чистка - 48 000 колеб/мин
Смарт-таймер	2 минуты
Время работы	Деликатный режим - 240 минут Уход за деснами - 80 минут Полировка - 80 минут Отбеливание - 100 минут Чистка - 200 минут
Время зарядки	12 часов

Назначение

Электрическая звуковая зубная щетка MORI BLACK от бренда WAU эффективно и бережно чистит зубы, удаляет налет и зубной камень. В основе работы щетки лежит принцип высокочастотной вибрации: очищение происходит за счет быстрого колебания щетинок, которое запускает звуковая волна (высокочастотная вибрация).


Благодаря встроенному деликатному режиму щетка подойдет для чувствительных зубов. MORI работает до четырех часов, имеет пять режимов, функцию памяти и таймер смены зоны чистки для максимального комфорта при уходе за полостью рта.

Детали устройства

- 1 - Насадка
- 2 - Корпус зубной щетки
- 3 - Кнопка включения/выключения/
переключения режимов
- 4 - Деликатный режим
- 5 - Уход за деснами
- 6 - Полировка
- 7 - Отбеливание
- 8 - Чистка
- 9 - Индикатор низкого уровня зарядки
- 10 - Индукционная база для зарядки

Комплектация

Корпус зубной щетки x1, сменные насадки: со щетинками средней жесткости x1, с мягкими щетинками x1, индукционная база для зарядки x1, инструкция x1.

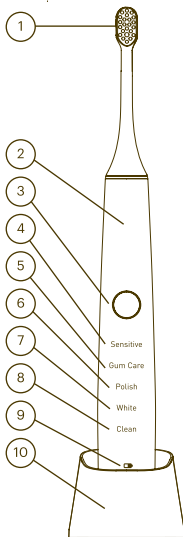

Порядок работы

1. Расположите насадку на щетку ровно над валом наконечника электродвигателя (трансмиссионным валом) и установите её.

Важно: не вкручивайте насадку во время установки.


2. Для включения щетки коротко нажмите на кнопку вкл/ выкл/ переключение режимов.

3. Повторное краткое нажатие на кнопку позволяет переключать режимы в следующей очередности: Деликатный / Sensitive, Уход за деснами / Gum care, Полировка / Polish, Отбеливание / White, Чистка / Clean.

4. Каждые 30 секунд щетка делает небольшую паузу, в качестве напоминания о необходимости сменить зону чистки.

5. По истечении 2-ух минут автоматическое время работы щетки закончится, и она выключится.

6. Для самостоятельного отключения щетки нажмите на кнопку вкл/ выкл/ переключение режимов.

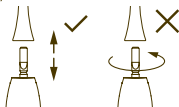

Способ применения

1. Установите насадку.

2. Смочите водой насадку зубной щетки и нанесите необходимое количество зубной пасты.

3. Включите щетку.

4. Поместите насадку щетки в ротовую полость. Держите ее под углом 45 градусов относительно десен. Нажмите на кнопку включения, выберите комфортный режим работы.

5. Начните чистку зубов. Проводите чистой головкой по зубу выметающими движениями от основания зуба к его концу.



6. Стоматологи рекомендуют чистить зубы не менее 2 минут. Полость рта можно условно разделить на 4 области и чистить каждую четверть зубного ряда (квадрант) по 30 секунд.



Для соблюдения этой рекомендации в щетку установлен таймер. Каждые 30

секунд щетка останавливается на несколько секунд.



По истечении 2-ух минут автоматическое время работы щетки закончится, и она выключится.

7. После завершения процедуры ополосните насадку и дайте ей высохнуть естественным путем. Корпус зубной щетки также можно сполоснуть водой.



Особенности зубной щетки MORI BLACK


Индикатор замены насадки

Рекомендуется менять насадку на щетку раз в три месяца. Щетинки оригинальной насадки средней жесткости на электрическую щетку MORI обесцвечиваются в форме сердечка после 3-ех месяцев использования, напоминая о необходимости замены насадки.



Функция памяти

Щетка запомнит последний режим, который вы использовали больше 5 секунд. При следующем включении она начнет работу именно с этого режима.

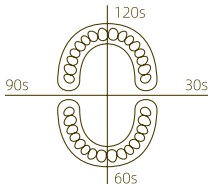



Переключение 1 кнопкой
Простое и удобное переключение режимов/ включение щетки 1 кнопкой.

Чистка

- насадки электрической звуковой зубной щетки MORI

Прополаскивайте водой после каждого использования и дайте насадке высохнуть естественным образом.

Чтобы продлить срок эксплуатации продукта используйте сменные насадки предназначенные для щетки MORI (артикул LL-35).

- корпус зубной щетки

Корпус щетки можно очищать непосредственно водой, после чего нужно дать прибору высохнуть естественным путем.

Не используйте воду или кислотные очистители при температуре выше 40°C.

Хранение

- не роняйте

Пожалуйста, откажитесь от использования щетки, если корпус или насадка повреждены.

- храните вдали от источников тепла

Зарядную базу не рекомендуется использовать в местах с повышенной температурой.

- не разбирайте и не разбирайте электрическую звуковую зубную щетку MORI самостоятельно

Если щетка требует ремонта, обратитесь, пожалуйста, к организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей.

Зарядка

Электрическая звуковая зубная щетка MORI заряжается перед отгрузкой с производства. Пожалуйста, зарядите щетку заново, когда полностью израсходуете заряд.

Индикатор низкого уровня зарядки мигает красным, когда требует подзарядки.

(Изображение на корпусе щетки не обозначает уровень заряда устройства, индикатор фиксирует только критически низкий уровень зарядки).

Во время зарядки корпус зубной щетки MORI мерцает (медленно подсвечивается и гаснет). По достижении полной зарядки мерцание прекращается.

Во время зарядки не кладите металлические предметы на зарядную базу, чтобы избежать несчастных случаев.

Пожалуйста, подзаряжайте щетку после того, как она будет полностью разряжена. Это позволит продлить сроки службы литий-ионного аккумулятора.

Утилизация



При утилизации продукта, пожалуйста, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.

Позаботьтесь об окружающей среде и отдайте электроприбор в центр переработки отходов.

Утилизация литий-ионного аккумулятора

Встроенные перезаряжаемые аккумуляторы содержат вещества, загрязняющие окружающую среду. При утилизации электрической звуковой зубной щетки MORI всегда вынимайте батарейку и утилизируйте её в специализированных местах переработки.

Если у вас возникли сложности с изъятием аккумулятора, вы можете также обратиться к организации, уполномоченной производителем на принятие претензий от потребителя за помощью.

Достаньте только батарейку при утилизации щетки. Убедитесь, что аккумулятор полностью истощен при его удалении.

Алгоритм действий:

1. Отключите щетку от источника питания.
2. Прекратите её использование.
3. Снимите крышку со дна щетки.
4. Достаньте механизм.
5. Выньте аккумулятор.

Важно, после того, как удалите батарею, не подключайте щетку к источнику питания.

Наименование и содержание опасных веществ в продукте

Название компонента	Токсичные или опасные вещества и элементы					
	Свинец	Ртуть	Кадмий	Оксид хрома	PBBs	PBDEs
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Схема управления цепями	○	○	○	○	○	○
Электрические компоненты	×	○	○	○	○	○
Батарея	○	○	○	○	○	○
Шнур электропитания	○	○	○	○	○	○

Данная таблица подготовлена в соответствии с нормами SJ/T 11364.

○ обозначает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах компонентов ниже требований, закрепленных в стандарте GB/T 26572.

× обозначает, что содержание опасного вещества в хотя бы одном из однородных веществ компонентов превышает допустимые требования стандарта GB/T 26572.



Данный знак идентифицирует безопасность использования продукта для окружающей среды на период в 10 лет. В данный срок продукт сохраняет токсичные и опасные вещества в норме, позволяющей избежать их утечки или мутации. Ис-

пользование продукта в данный период не вызовет серьезного загрязнения окружающей среды или вреда потребителю/ его имуществу. При утилизации продукта по истечении периода его безопасности для окружающей среды, следует руководствоваться локальными нормами и законами о переработке отходов.

Гарантия

На электрическую звуковую зубную щетку MORI BLACK от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

Вопросы и ответы

В: Сила вибрации щетки становится слабей и слабей.

О: Проверьте, достаточно ли заряжено устройство, заряжайте щетку вовремя.

В: После подзарядки, индикатор продолжает показывать низкий уровень заряда.

О: Убедитесь, что электрическая зубная щетка во время зарядки сохраняет вертикальное положение, это может сказаться на качестве зарядки. Если проблема сохраняется, возможно истек срок службы батареи. Свяжитесь с организацией, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей.

В: Электрическая зубная щетка не использовалась на протяжении долгого времени. Когда щетка была поставлена на зарядку, корпус не начал мерцать, как должно быть в процессе зарядки.

О: Если батарея не использовалась более 6 месяцев, запускается спящий режим. Потребуется от 6 до 20 минут, чтобы щетка вернулась к стандартному режиму зарядки.

В: Что делать, если щетка не включается?

О: Проверьте, пожалуйста, не является ли это следствием низкого уровня заряда, включается ли щетка после зарядки. Если это не решат проблему, пожалуйста, обратитесь в организацию, уполномоченную изготовителем на принятие претензий от потребителей.

MORI BLACK

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Артикул: **LL-35**

Материал: **РС пластик**

Размер: **(ВхШхГ) 258х55х47 мм**

Вес: **200 гр**

Напряжение: **4 В**

Мощность: **3 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-14. 8-800-600-33-61.

zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS

