

wau



MIGA

ORAL CARE IRRIGATOR

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	4
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения	8
Меры предосторожности.....	10
Хранение	11
Зарядка	12
Неисправности и способы их устранения.....	13
Утилизация.....	14
Гарантия.....	14


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	OI-2107
Диаметр сопла	0,6 мм
Давление воды	60-100 PSI
Объем резервуара для воды	70 мл
Номинальное напряжение	3,7 В
Номинальная мощность	5 Вт
Время зарядки	более 2-х часов
Время работы от полной зарядки	20 мин
Степень защиты от воды	IPX7
Входное напряжение	5В 1А

Назначение

Ирригатор MIGA от бренда WAU - это портативное устройство для ухода за полостью рта. Данный девайс успешно решает проблему удаления зубного налета, борется с зубным камнем и запахом из рта, удаляет остатки пищи из труднодоступных мест ротовой полости, а также обеспечивает профилактику заболеваний десен.

Детали устройства

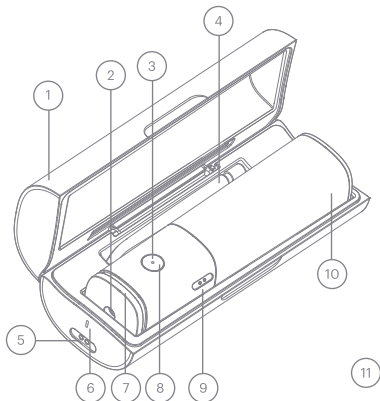

1 - Кейс для хранения

2 - Отверстие
для установки сопла

3 - Индикатор состояния/
батареи

4 - Сопло

5 - Контактная точка для
зарядки на кейсе

6 - Индикатор зарядки кейса

7 - Верхняя крышка
/механизм снятия сопла

8 - Кнопка вкл/выкл

9 - Контактная точка для
зарядки ирригатора (на об-
ратной стороне устройства)

10 - Резервуар для воды


Комплектация



12



13

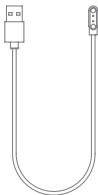

14

11. Ирригатор и кейс для хранения x1

12. Сопло x1


13. Инструкция x1

14. Кабель для зарядки x1

Порядок работы

1. Подготовка к использованию


Перед первым использованием устройства полностью зарядите аккумулятор, для этого подсоедините магнитный кабель для зарядки к контактам на корпусе ирригатора. Во время зарядки устройством пользоваться нельзя.

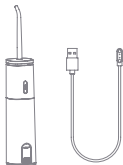

2. Установка/снятие сопла

а. Вставьте сопло в отверстие на верхней крышке устройства до щелчка. Щелчок означает, что сопло успешно установлено.

б. Для снятия сопла надавите на верхнюю крышку устройства и, удерживая ее в таком положении, извлеките сопло.

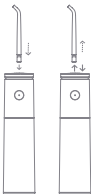

3. Наполнение резервуара

Убедитесь, что устройство выключено, затем откройте крышку резервуара для воды, расположенную в нижней его части, и заполните емкость водой.




4. Включение/выключение

Для того, чтобы включить или выключить устройство, необходимо нажать на кнопку вкл/выкл.


[Примечание]: Во время использования устройства индикатор постоянно горит синим цветом.

Способ применения


1. Установите сопло и приведите устройство в рабочее состояние. Для этого держите изделие за корпус одной рукой и потяните резервуар для воды вниз другой рукой, как показано на рисунке.

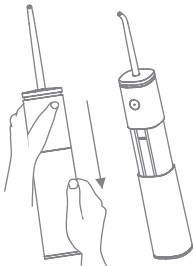

2. Поместите сопло в ротовую полость, направьте его в сторону зубов и нажмите кнопку вкл/выкл для включения устройства. В ходе чистки ирригатор необходимо держать вертикально.

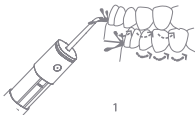


3. Для получения наилучших результатов начинайте чистку с моляров (задних зубов) и перемещайте сопло так, как показано на рисунке. Направляйте поток воды на десны под углом 90 градусов, не открывайте рот широко, чтобы вода не разбрызгивалась по сторонам.

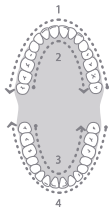

4. Перемещать сопло необходимо вдоль линии десен, ненадолго задерживаясь у каждого зуба до тех пор, пока десневой карман и межзубное пространство не будут очищены.

[Примечание]: Легкая кровоточивость при первых чистках является нормой, она пропадет в течение недели. Если кровоточивость не прекращается более 2-х недель, прекратите пользоваться устройством и проконсультируйтесь со стоматологом.

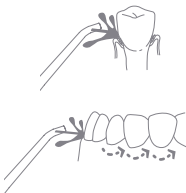

5. После завершения чистки выключите устройство нажатием на кнопку вкл/выкл и удалите остатки воды из резервуара. Для этого откройте крышку резервуара и слейте воду, а затем сложите ирригатор в исходное состояние.

[Примечание]:

Обращаем Ваше внимание, что перед первым использованием Вы можете обнаружить влагу внутри нового устройства. Это дистиллированная вода, оставшаяся после испытания роботоспособности изделия.

Меры предосторожности

1. Не используйте ирригатор в душе;
2. Не погружайте ирригатор в воду и не располагайте устройство в местах, где есть риск его падения в воду;
3. Не размещайте устройство в местах с высокой температурой или влажностью, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей;
4. Не прикасайтесь к упавшему в воду изделию, немедленно выньте вилку из розетки, если устройство заряжалось;
5. Не беритесь за устройство мокрыми руками в процессе его зарядки;
6. Никогда не оставляйте изделие без присмотра в ходе зарядки;
7. Осторожно обращайтесь с зарядным кабелем: держите его вдали от источников тепла, не растягивайте, не сгибайте и не скручивайте с использованием силы, не допускайте пережиманий кабеля, так как это может привести к его выходу из строя;
8. Не используйте ирригатор и не заряжайте его, если само устройство или зарядный кабель имеют повреждения (в результате падения, попадания воды и т.д.);
9. Ирригатор необходимо заряжать только при помощи оригинального зарядного устройства, не подключайте это устройство к сети с напряжением, отличным от напряжения, указанного на устройстве;
10. Используйте данное изделие только по назначению в соответствии с данным руководством;
11. Не используйте устройство без сопла, не используйте насадки, не рекомендованные производителем;
12. Хранить в недоступном для детей месте. Использование детьми и людьми с ограничениями дееспособности допустимо строго под присмотром;
13. Не перекрывайте вентиляционные отверстия изделия и не ставьте его на мягкую поверхность, например, на кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы. Не допускайте попадания в вентиляционные отверстия ворсинок, волос и т.п.;

14. Не вставляйте в ирригатор посторонние предметы;
15. Перед набором воды в резервуар отключите устройство от зарядного кабеля, не допускайте перелива при заполнении резервуара;
16. Не используйте прибор на открытом воздухе или в местах, где распыляются аэрозольные продукты или подается кислород;
17. Перед чисткой и обслуживанием убедитесь, что устройство выключено и не заряжается.

[Примечание]:

- a. Пользователи, страдающие пародонтитом или перенесшие операцию на полости рта в течение последних 2 месяцев, должны проконсультироваться с врачом перед использованием этого устройства;
- b. Во избежание ожогов не выполняйте процедуру чистки с водой температурой выше 40°C;
- c. Во избежание травм не давите насадкой на десны или зубы в ходе процедуры.

Хранение

- a. Держите устройство вдали от воздействия высоких температур.
- b. Держите устройство подальше от агрессивных жидкостей.
- c. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Зарядка

1. Зарядку устройства можно проводить двумя способами:
 - а. положите ирригатор в кейс и подключите магнитный кабель для зарядки к контактам на боковой стороне кейса;
 - б. подключите магнитный кабель для зарядки непосредственно к ирригатору (к контактам на задней стороне устройства).
2. В процессе зарядки светодиодный индикатор мигает синим цветом. Он будет гореть постоянно, когда аккумулятор полностью зарядится.
3. Во время использования устройства индикатор начинает мигать, если осталось менее 20% заряда аккумулятора.
4. Зарядное устройство подходит для сети AC 100-240 В, 50/60 Гц, выходное напряжение устройства 5 В 1 А.

[Примечание]:

Во время зарядки устройством пользоваться нельзя

Неисправности и способы их устранения

Проблема	Причина	Решение
Протекает вода между корпусом устройства и соплом	Уплотнительное кольцо держателя сопла повреждено или сопло установлено неправильно	Свяжитесь с клиентской службой продавца
Протекает корпус устройства	Уплотнительное кольцо повреждено, загрязнены края отверстия подачи воды	Свяжитесь с клиентской службой продавца
Протекает резервуар	Повреждено уплотнение	Свяжитесь с клиентской службой продавца и замените уплотнение
Недостаточное давление	Низкое напряжение аккумулятора	Полностью зарядите аккумулятор перед использованием
Устройство не включается	Низкое напряжение аккумулятора	Полностью зарядите аккумулятор перед использованием. В случае, если это не помогло, свяжитесь с клиентской службой продавца и замените уплотнение
Устройство не подает воду	Первое использование или использование после долгого перерыва	Добавьте небольшое количество воды в отверстие для установки сопла, установите сопло и повторно включите устройство

Утилизация



Для утилизации изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Вместо этого передайте его в специализированный центр переработки для защиты окружающей среды.

Гарантия

На ирригатор MIGA от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

MIGA

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР

Артикул: **OI-2107**

Материал: **ABS пластик**

Размер: (ВхШхГ) **154x39,9x40 мм**

Вес: **157 г**

Напряжение: **3,7 В**

Мощность: **5 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем
на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, ул. Ленинградский
пр-т 37, 14-18. 8-800-600-33-61.

zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования
продукции производитель сохраняет за собой право
внесения изменений в конструкцию, комплектацию и
технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно
посмотреть на сайте wau.ru



RoHS

