

wau



UMI

ULTRASONIC SKIN SCRUBBER

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	4
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения	6
Чистка	8
Хранение	8
Зарядка	8
Меры предосторожности.....	9
Гарантия.....	10


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	BJ-1903B
Материалы	ABS пластик, силикон
Размер (ВхШхГ)	51,3x29,3x122,3 мм
Вес	131 гр
Источник питания	литийный аккумулятор
Ёмкость аккумулятора	420 мАч
Напряжение питания	5 В
Рабочее напряжение	3,7 В
Мощность	2 Вт
Частота ультразвука	25K±5 кГц
Время зарядки	5 часов
Время работы (от полной зарядки)	35 минут
Смарт-таймер	5 минут
Уровень водонепроницаемости	IPX5

Назначение

UMI - это миниатюрный ультразвуковой скрабер для лица. 2 режима работы обеспечат комплексный уход за кожей. В режиме «Глубокого очищения» высокочастотная ультразвуковая вибрация и положительные ионы, раскрывая поры и выталкивая грязь, помогают бережному очищению кожи. В режиме «Увлажнения» высокочастотные ультразвуковые вибрации и отрицательные ионы, разрыхляя поверхность кожи, ускоряют процесс впитывания уходовых средств.

Детали устройства

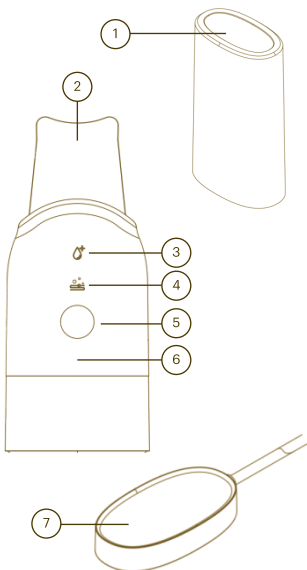

- 1 - Магнитная крышка
- 2 - Аппликатор
- 3 - Индикатор режима очищения
- 4 - Индикатор режима увлажнения
- 5 - Кнопка вкл/выкл/переключение режимов
- 6 - Индикатор уровня заряда
- 7 - База для индукционной зарядки

[Примечание]: данное устройство поставляется со встроенным литиевым аккумулятором и может заряжаться только от индукционного зарядного устройства (в комплекте).

Комплектация

Устройство x1, индукционная база для зарядки x1, салфетка x1, мешочек для хранения x1, инструкция x1.

Порядок работы

1. Девайс управляется одной кнопкой. Нажмите на кнопку «Вкл/выкл/ переключение режимов», чтобы включить устройство. Запуститься режим «Глубокое очищение», вы услышите звуковой сигнал, загорится индикатор соответствующего режима.

2. Для переключения режима повторно нажмите на кнопку «Вкл/выкл/ переключение режимов». Устройство начнет работу в режиме «Увлажнения», прозвучит 1 звуковой сигнал, загорится соответствующий индикатор.

3. Выключите устройство, нажав на кнопку «Вкл/выкл/ переключение режимов». Устройство выключится издав 1 звуковой сигнал.

Обратите внимание, что смарт таймер скрабера имеет длительность 5 минут. Даже при переключении режимов общее время работы устройства составит 5 минут.

Способ применения

Режим «Глубокое очищение»

1. Перед использованием удалите макияж и умойте лицо очищающим средством.




2. Для достижения наилучшего эффекта перед началом чистки рекомендуется проводить процедуру холодного распаривания с помощью геля для дезинкрустации (геля для УЗ чистки). Нанесите гель на лицо, избегая попадания в глаза, закройте пленкой, держите гель 15 минут, после чего приступайте к процедуре чистки скрабером.

Кроме геля или лосьона для УЗ чистки допустимо использовать физ.раствор, а также термальную воду.

3. Нажмите кнопку «Вкл/выкл/ переключение режима» для включения режима «Глубокое очищение».



4. Возьмите устройство передней стороной вверх (лопатка должна находиться под углом 40 градусов относительно кожи). Далее ведите аппликатором по массажным линиям, очищая необходимые зоны лица. Устройство выключится автоматически через 5 минут.

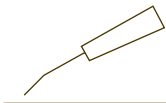

5. Умойте лицо теплой водой, насухо очистите аппликатор.

6. После процедуры очищения рекомендуется приступить к процедуре увлажнения.


Режим «Увлажнение»

1. После очистки лица равномерно нанесите на лицо уходовое средство на ваш выбор.

2. Включите устройство и нажмите на кнопку еще раз для перехода в режим увлажнения.



3. Возьмите устройство наоборот: передней стороной вниз (лопатка не упирается в кожу, а как будто ложится на нее), приложите аппликатор к лицу и нежно проводите лопаткой, двигаясь по массажным линиям снизу вверх, чтобы достичь полного впитывания косметического средства.

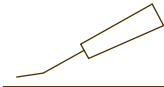

4. После 5 минут работы устройство выключится автоматически.

5. Вытрите аппликатор и положите скрабер на место.

[Примечание]: Частота использования скрабера UMI зависит от типа кожи. Для тонкой кожи проводить чистку рекомендуется не чаще 1 раза в неделю. Для жирной кожи допустимо использовать девайс до 2 раз в неделю.

Чистка

После каждого использования прополаскивайте аппликатор водой и протирайте сухой салфеткой. Запрещено погружать устройство в воду надолго.

Хранение

- Храните устройство в сухом месте, защищенном от попадания пыли.
- Храните устройство вдали от источников тепла.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Зарядка

Уровень заряда аккумулятора отображается с помощью 3 световых индикаторов на корпусе скрабера. Чем меньше индикаторов горит, тем меньше заряд. При заряде менее 25% горит только 1 индикатор.

При заряде аккумулятора менее 25% девайс издает звуковой сигнал 3 раза, предупреждая о низком уровне заряда устройства. При заряде аккумулятора менее 10% после 3 звуковых сигналов устройство автоматически выключается.

Для зарядки устройства установите его на индукционную зарядную базу. Базу с кабелем и разъемом USB подсоедините к USB разъему компьютера

или адаптера. Начните зарядку устройства, во время зарядки индикаторы зарядки мигают. Во время зарядки устройство не работает.

По достижении 100% зарядки все 3 индикатора зарядки будут гореть непрерывно.

Меры предосторожности

Запрещено использовать девайс,

- если за прошедший месяц вы подвергались хирургическому вмешательству, или у вас есть серьезные солнечные ожоги на поверхности кожи;
- если ваша кожа воспалена, имеет царапины, повреждения или у вас есть аллергия на электромагнитные волны;
- на глазах;
- на одной и той же области в течение долгого времени.

Перед использованием

- снимите с себя все металлические предметы, такие как часы, очки и т.д.

С осторожностью

- если у вас есть лицевые импланты из силикона, а также зубные металлические коронки, штифты, брекеты. При использовании устройства ориентируйтесь на собственные ощущения и чувствительность вашей кожи. Если применение девайса вызывает значительный дискомфорт, прекратите использование.

Важно

- не оставляйте работающее устройство без присмотра;
- держите блок питания вдали от источников тепла;
- не разбирайте устройство самостоятельно;
- не пользуйтесь устройством после сильного удара или падения прибора на землю до проверки безопасности эксплуатации.

Неисправности и способы их устранения

Вопрос	Ответ	Решение
Устройство не включается или внезапно выключается	1. Аккумулятор разряжен 2. Устройство не исправно	1. Заряжайте устройство в течение 5 часов, затем повторно включите. 2. Обратитесь за помощью к организации, уполномоченной производителем на принятие претензий от потребителей, если устройство не работает даже после полной зарядки.
Вибрации становятся едва заметными	Аккумулятор разряжен	Заряжайте устройство в течение 5 часов, затем повторно включите.
Рекомендация: если устройство не использовалось на протяжении долгого времени (6 и более месяцев), прибор следует полностью зарядить перед применением.		

Гарантия

На ультразвуковой скрабер для лица UMI от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту.

Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

UMI

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРАБЕР ДЛЯ ЛИЦА

Артикул: **VJ-1903**

Материал: **ABS пластик, силикон**

Размер: (ВхШхГ) **51,3х29,3х122,3 мм**

Вес: 131 гр

Напряжение: **3,7 В**

Мощность: **2 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная
изготовителем на принятие претензий
от потребителей: ИП Уманцев А.Н.
125167, г. Москва, ул. Ленинградский
пр-т 37, 14-14.
8-800-600-33-61.
zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного
совершенствования продукции
производитель сохраняет за
собой право внесения изменений
в конструкцию, комплектацию и
технические характеристики.
Новейшую версию данного
руководства можно посмотреть на
сайте wau.ru



RoHS

